

# FLEXCELL® FLEXSTOP™

ストッパー



## 選択的に! FlexStopで個別にストレッチングを遮断

- 繰り返し使用できるゴム製ストッパーで、BioFlex、Tissue Train、UniFlex プレートのウェル下面に挿入して真空圧を遮断、基底の歪みを防止します。
- BioFlex、Tissue Train、UniFlex 培養システム下の細胞に対する機械的負荷効果を試験する際の対照用セット（静置培養）になります。

### FlexStop 構成:

- ゴム製ストッパー 12 個
- BioFlex、Tissue Train、UniFlex のウェルにセットするための真鍮製ピン 12 個

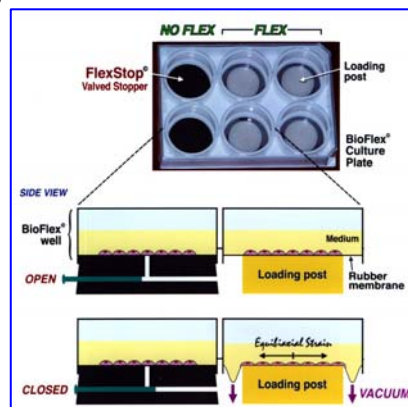


図11. FlexStopで真空圧によるウェル基底の歪みを防止する仕組みを示す模式図。